

QUICKIE® Rumba modular



Quickie® Rumba Modular to uniwersalny i wszechstronny elektryczny wózek inwalidzki, zaspokajający potrzeby zarówno użytkowników, jak i pracowników służby zdrowia.

Nowa, regulowana konstrukcja i szereg opcji modułowych umożliwiają pracownikom służby zdrowia opiekę nad pacjentami cierpiącymi na różne schorzenia - każdy wózek można idealnie dostosować do indywidualnych potrzeb

Wózek jest zwarty i zwrrotny, posiada mały promień zawracania ułatwiający manewrowanie we wnętrzach, jak również dużą moc do wykorzystania na zewnątrz. W modelu Rumba Modular udało się osiągnąć idealną równowagę pomiędzy bezpiecznymi osiąganiami na zewnątrz, zwrotnością we wnętrzach i komfortem zapewnianym dla użytkownika.



Doskonała zwrotność we wnętrzach


Kompaktowa rama i mały promień zawracania sprawiają, że jazda wózkiem Rumba Modular we wnętrzach jest bezpieczna i prosta. Manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach jest bezpieczne i proste dzięki płynnemu napędowi, dobrym osiągom oraz regulowanej prędkości.

Doskonale osiągi na zewnątrz


Jazda wózkiem Rumba Modular na zewnątrz jest bezpieczna i pewna. Silniki o dużej mocy oraz programowalny sterownik umożliwiają płynną i dynamiczną jazdę, zaś dobrze wyważona, składana rama zapewnia bezpieczeństwo, stabilność i komfort użytkowania na nierównych powierzchniach.




Szerokość siedziska: + 5 cm / 5 cm *

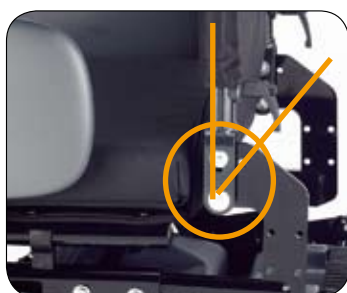


Nachylenie oparcia: 0° - 30°

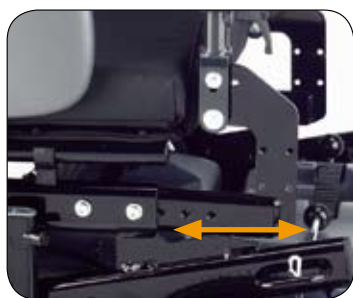

Głębokość siedziska: 42 - 50cm

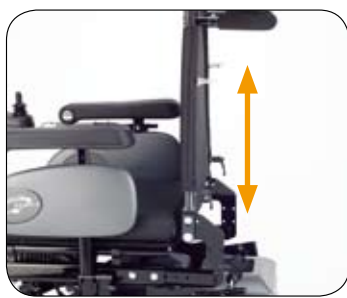

Wysokość oparcia: 48 - 58 cm

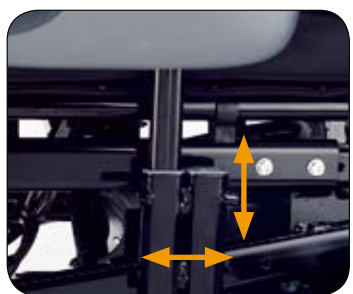

Wysokość podłokietnika: 22 - 30cm
Głębokość podłokietnika: 7 cm



Długość podnóżka: 40 - 47 cm

Wygoda łatwej regulacji

Wózek Rumba Modular jest wyposażony w funkcje regulacji pozwalające na jego dostosowanie do indywidualnych wymogów. Możliwe jest zastosowanie siedzisk o szerokości od 37 cm do 53 cm, zaś oparcie zapewnia głębokość siedziska od 42 cm do 50 cm w każdym wózku.

Regulacje wózka Rumba Modular wykonuje się szybko i prosto. Korzystając z zaledwie dwóch standardowych rozmiarów ram, pracownicy służby zdrowia mogą dostosować wózek do indywidualnych potrzeb pacjenta, zaś dzięki szerokiej ofercie opcji modułowych możliwe jest jednocześnie zapewnienie wygody użytkownika i realizacji celów medycznych.

Opcje modułowe

Wózek Rumba Modular jest dostępny z szeroką ofertą opcji wraz z opcją comfort, a także możliwości zmiany pozycji oraz sterowania ręcznego lub elektrycznego. Wszystkie opcje mają charakter modułowy, dzięki czemu ich dodanie nie pociąga za sobą konieczności wprowadzania skomplikowanych zmian czy dodawania nowych elementów, przez co nie tylko regulacja, ale również zmiana konfiguracji wózka Rumba Modular jest czynnością prostą i wydajną.



Podnóżki podnoszone ręcznie lub elektrycznie



Wybór podnóżków podnoszonych ręcznie lub elektrycznie zapewniających odpowiednie podparcie.

Uchylnie oparcie



Zarówno ręczne pochylanie za pomocą rozpórek gazowych (-9° do 30°), jak również pochylanie elektryczne (0° - 30°) umożliwia użytkownikom regulowanie kąta nachylenia oparcia.

Oparcie z regulacją napięcia



Wyściełana tapicerka z możliwością regulacji napięcia zapewnia bardziej dokładne pozycjonowanie, co gwarantuje maksymalne wsparcie i wygodę.

Zaglówek na zawieszaniu



Zaglówek na zawieszaniu został przetestowany z pozytywnym rezultatem pod kątem transportu w wąskich przejściach zgodnie z ISO / NP 7176-19 2001.

Anatomiczny zaglówek




Wersja anatomiczna zagłówka zapewnia więcej możliwości regulacji głębokości, wysokości i kąta nachylenia w stosunku do wersji standardowej.

Wygodne siedzisko




Komfortowe siedzisko i oparcie zapewniają dodatkowe wsparcie i większą wygodę. Na ilustracji pokazano standardowy zaglówek.

Element do pokonywania krawężników (demontowalny)

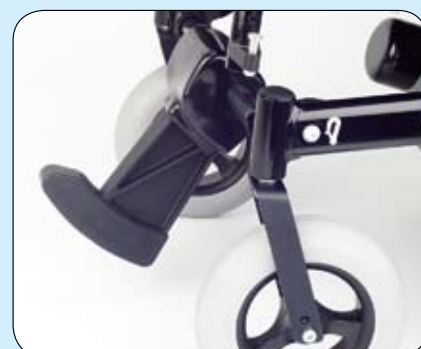

Element do pokonywania krawężników, umożliwiający pokonywanie krawężników o wysokości do 10 cm, można łatwo zdemontować do celów transportu albo podczas używania we wnętrzach.

Składany stolik

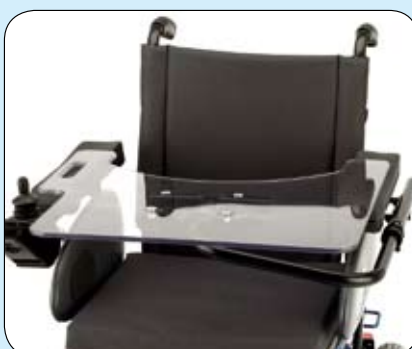

Składany stolik może zostać zamontowany z prawej lub z lewej strony.

Sterowanie rumplem



Nowy typ zamocowania sterownika zapewnia bardziej intuicyjne kierowanie wózkiem przez użytkownika. Dostępne w wersjach VR2 i R-net.



QUICKIE®



Wózek Quickie Rumba Modular został przetestowany z pozytywnym rezultatem pod kątem transportu w wąskich przejściach i zatwierdzony do użycia w pojazdach zgodnie z ISO/NP 7176-19 2001, przy użyciu 4-punktowego systemu pasów bezpieczeństwa Unwin WWR/ATF/K/R

Można również stosować inne systemy pasów bezpieczeństwa zgodne z wymogami ISO 10542 lub SAE J2249.

Przednie i tylne haki do stosowania z 4-punktowym systemem pasów bezpieczeństwa.

Dane techniczne: siedzisko

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kąt siedziska | 3° |
| 2. Głębokość siedziska | 42,5 45 47,5 50 cm |
| 3. Szerokość ramy | 42 48 cm |
| 4. Efektywna szerokość siedziska* | 37 - 47 cm / 43 - 53 cm |
| 5. Wysokość przedniego siedziska | 50 cm |
| 6. Nachylenie oparcia | 0° - 30° |
| 7. Wysokość oparcia (bez poduszki) | 48 51 53 cm |
| 8. Szerokość oparcia | 42 48 cm |
| 9. Obniżenie poziomu podnóżka | 40 - 47 cm |
| 10. Kąt podnóżka | 70° / 70° - 0° podniesienia |
| 11. Wysokość podłokietnika | 22 - 30 cm |

* Szerokość siedziska można uzyskać poprzez regulację podłokietników oraz dzięki podłokietnikom o zmniejszonej szerokości

Specyfikacja

| | |
|--|----------------|
| Szerokość całkowita | 57 / 63 cm |
| Całkowita długość (z podnóżkiem) | 101** / 107 cm |
| Promień skrętu | 85 cm |
| Szerokość po złożeniu** | 35 cm |
| Waga całkowita (z akumulatorami)*** | 75 kg - 89 kg |
| Waga najcięższego elementu | 37,4 kg |
| Pojemność akumulatora | 40 aH / 50 aH |
| Zasięg | 25 / 30 km |
| Możliwość pokonywania krawężników (z elementem do pokonywania krawężników) | 10 cm |
| Dopuszczalna waga użytkownika | 125 kg |
| Maksymalne bezpieczne nachylenie | 8° |
| Przetestowane z pozytywnym rezultatem pod kątem transportu w wąskich przejściach zgodnie z ISO 7176 Część 19 | Tak |

** 101 cm długości całkowitej, gdy zabezpieczenia stabilizujące obciążone sprężyną są złożone

*** Całkowita waga wózka zależy od konfiguracji

**** Przetestowano w następujący sposób: głębokość siedziska ustawiona na 50 cm, odchylenie ustawione na 30° z użytkownikiem o wadze maksymalnej 125 kg w wózku

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg
T: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
F: +49 (0) 72 53 / 9 80-111
www.sunrisemedical.com

